

SURFA'SAFE Premium

Espuma detergente
desinfectante de las
superficies y de los
dispositivos médicos



- Concepto patentado
- Fórmula sin alcohol, sin perfume y sin CMR
- Eficacia antimicrobiana rápida: bacterias incluida BHR, Rotavirus, etc. a partir de 2 min.
- Amplia compatibilidad con los materiales
- Espuma densa para limitar el goteo del aerosol durante su difusión

LISTO PARA
USAR



A partir
de 2 min.

INDICACIONES

Espuma detergente desinfectante, destinada a la limpieza y desinfección de las superficies, estructuras externas de los equipos (respiradores, generadores de hemodiálisis, etc.) y de los productos sanitarios no sumergibles y no invasivos (sondas ecográficas clásicas, sensores de presión, medidores de glucosa, tensiómetros, martillos de reflejos, etc.).

CARACTERÍSTICAS

- Limpiador y desinfectante todo en uno
- Sin sustancia CMR, sin alcohol, sin perfume ni colorante
- Amplio espectro antimicrobiano y tiempo de contacto optimizado
- Dispensador de espuma compacta para limitar la formación de aerosol y la volatilidad de los componentes (750 ml)
- Fórmula que garantiza la compatibilidad con una amplia gama de materiales incluidos los polímeros (ej.: policarbonato, plexiglás, etc.)
- Espuma densa para una mejor adherencia a las superficies (750 ml)
- Secado rápido de las superficies y sin restos
- Biocida de tipo 4 que puede usarse en las superficies que puedan entrar en contacto con productos alimentarios, seguido de un aclarado
- Mejora del perfil ecotoxicológico: reducción de emisiones de GEI* del 7 % con respecto a un producto de igual aplicación
- pH: 6 +/- 0,5

* Gas de efecto invernadero

SURFA'SAFE Premium

Espuma detergente desinfectante de las superficies y de los dispositivos médicos


MODO DE EMPLEO



1 **Aplicar la espuma** detergente desinfectante en la superficie que desee tratar o preferentemente en un material no tejido.



2 **Repartir la espuma** por la superficie que desee tratar. Respetar el tiempo de contacto indicado según la actividad antimicrobiana deseada.

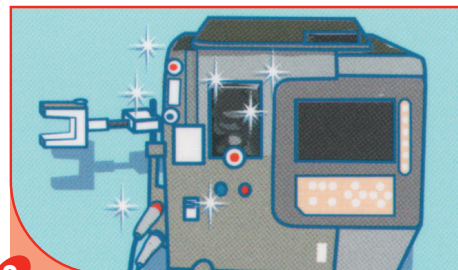

3 **Dejar secar.** No aclarar (excepto para las superficies que estén en contacto con productos alimenticios, la piel o mucosas).

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecildimetilamonio
(N° CAS 7173-51-5: 3 mg/g), excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso – respete las precauciones de uso (Establecidas según las normas europeas vigentes en materia de clasificación y etiquetado de productos químicos). Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo. Almacenar entre +5° C y +35° C. Producto biocida destinado a la desinfección de superficies en contacto o no con los productos alimentarios (Grupo 1-TP 2 & 4) - uso reservado a los profesionales. Dispositivo médico de la clase IIa. (Directiva 93/42/CEE modificada).

ACONDICIONAMIENTOS

1 12 envases de 750 ml
con dispensador de espuma.....2419.544

Existe en versión solución no espumante :

2 16 envases piseta de 500 ml2419.105

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo frente a	Normas	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040, EN 13727, EN 13697	2 minutos
	Segundo EN 13727 sobre ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, K. pneumoniae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis	1 minuto
	Segundo EN 13697 sobre ERV, A. baumannii β LSE, E. coli OXA 48, E. cloacae OXA 48, SARM, Listeria monocytogenes, Salmonella enteridis	2 minutos
Levaduras	EN 1275, EN 13697	5 minutos
	EN 13624	2 minutos
Mohos	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minutos
	Segundo EN 13624, EN 13697 sobre Aspergillus fumigatus y Tricophyton mentagrophytes	15 minutos
Virus	EN 14476 : Adenovirus, MNV	30 minutos
	Segundo EN 14476: sobre HIV-1, PRV (virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Vacciniavirus*, HSV, Rotavirus, VRS	1 minuto
	Segundo EN 14476 : sobre Polyomavirus SV 40, Coronavirus	5 minutos

*El Robert Koch Institute recomienda la utilización de desinfectantes con la indicación "begrenzt viruzid wirksan", es decir, actividad virucida limitada, para interrumpir la cadena de transmisión. Según este instituto, la actividad virucida limitada corresponde a una actividad sobre el virus de la viruela y el de la BVDV. La actividad antimicrobiana del producto se recoge en el dossier científico, disponible bajo petición.

