

SURFANIOS Premium

Detergente desinfectante
suelos y superficies



- Productos que combinan las acciones detergente y desinfectante en una operación simultánea
- Eficacia demostrada en bacterias y humedades aisladas del entorno hospitalario
- Producto formulado sin aldehído
- Optimización de la informaciones ecotoxicológicas

INDICACIONES

Limpieza y desinfección de suelos, paredes y material médico.

CARACTERÍSTICAS

- Solución de color verde
- pH del producto puro: 11.2
- pH del producto diluido : aprox. 8
- Densidad : 1.007
- Indice de refracción : 1.3587

PRODUCTO
A DILUIR
20 ml > 8 L




0,25%


SURFANIOS Premium

Detergente desinfectante suelos y superficies


MODO DE EMPLEO

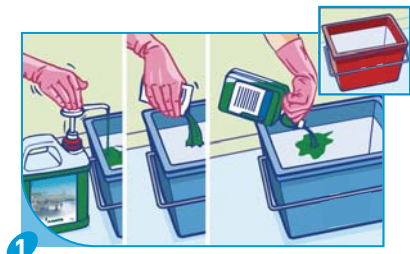

1 Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua. **Dilución al 0,25%** : Verter una dosis de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM en el recipiente de lavado.

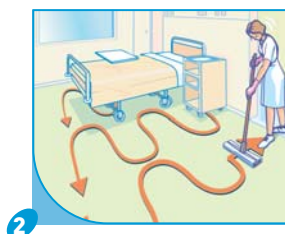

2 Proceder al lavado respetando el esquema de limpieza: desde el fondo hasta la salida. No aclarar la superficie.

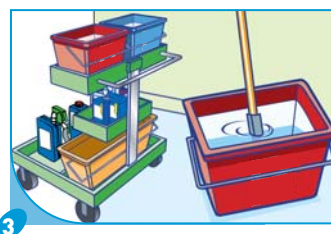

3 Lavar y escurrir la franja antes de el baño en la cubeta. (El transporte de los hogares no es ser colocado en la habitación, pero en el pasillo).



4 Después de limpiar cada sector, cambie la gasa y renueve la solución de lavado y de aclarado. Introduzca las gasas sucias en el recipiente previsto para este fin.

COMPOSICIÓN

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina – CAS N° 2372-82-9 (51 mg/g), cloruro de didicildimetilamonio – CAS N° 7173-51-5 (25 mg/g), excipientes.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Peligroso. Respetar las precauciones de uso (establecidas según la Directiva 99/45/CE y sus adaptaciones). Utilizar los biocidas con precaución. Antes de su utilización, leer la etiqueta y la información relativa al producto. Almacenar entre +5°C y +35°C. Biocida para la desinfección de superficies (Grupo principal 1 - TP2). De uso reservado a los profesionales.

ACONDICIONAMIENTOS

SURFANIOS Premium

- 1 500 bolsitas de 20 ml.....Ref. 1917.129
- 2 12 frascos de 1 litro con dosificador.....Ref. 1917.092
- 3 4 bidones de 5 litros con 1 bomba dosificadora de 20 ml.....Ref. 1917.036

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo sobre	Normas	Tiempo de contacto		
		0,25%	0,5%	1%
Bacterias	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5 min.		
	BMR (EN 1276)	5 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
	BMR (EN 13697)	15 min.		
Micobacterias	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 min.	30 min.	
	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60 min.	30 min.	
Levaduras	EN 1275, EN 1650	15 min.		
	EN 13697	30 min.	15 min.	
Mohos	EN 1275	15 min.		
	EN 13697	30 min.		15 min.
	EN 1650	120 min.		
Virus	Según EN 14476	5 min.		
	HIV-1, PRV (virus modelo de HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpès virus			
	Vacciniavirus	60 min.	15 min.	

